

データ管理ソフトのインストール

運動負荷モニター データ管理ソフトのセットアップ手順を説明します。予め USB ケーブル(A プラグ-B ミニプラグ)をご用意下さい。同ケーブルはパソコン販売店でご購入できます。

PC動作環境: Windows Vista(32bit)、Windows XP(32bit)

それ以外のOSでは動作保証されません。

ダウンロードファイルの確認

Zip ファイルを解凍し、フォルダの中身を確認します。



Zip ファイルを解凍しても「ESM_DAS_FullVersion」フォルダが作成されなかった場合、これらをデスクトップなどにコピーして、以下のインストールを行なって下さい。

データ管理ソフトのインストール

Setup.exe を実行してください。プログラムの指示に従ってインストールします。

Windows Vista でインストールを行なう場合は以下の警告メッセージが出ることがあります。

ユーザーアカウント制御

認識できないプログラムがこのコンピュータへのアクセスを要求しています。

この場合は、「許可」を選択して実行してください。


USB ドライバのインストール

データ管理ソフトの使用に当たっては、USBドライバが必要です。以下の説明に従ってインストールを行なって下さい。


1. 本体の電源を切り、液晶画面には何も表示されていないことを確認して下さい。裏蓋を開けて Bミニプラグを USB コネクタに差し込みます。もう一方をパソコンの USB コネクタに差し込みま

- す。
2. インストール


USB ケーブルを接続すると以下の画面が現れます。

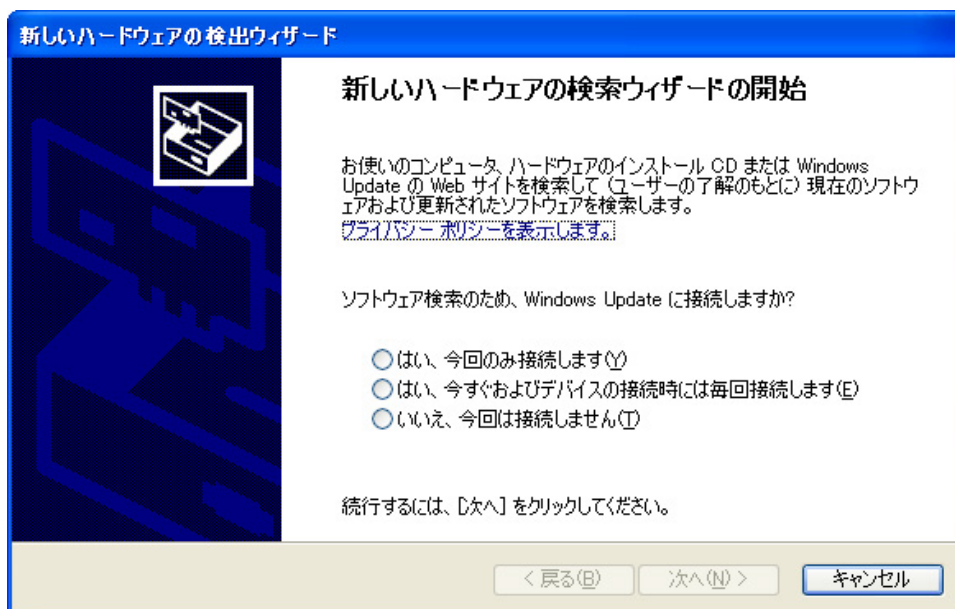


「いいえ、今回は接続しません」を選択して次へ進んでください。

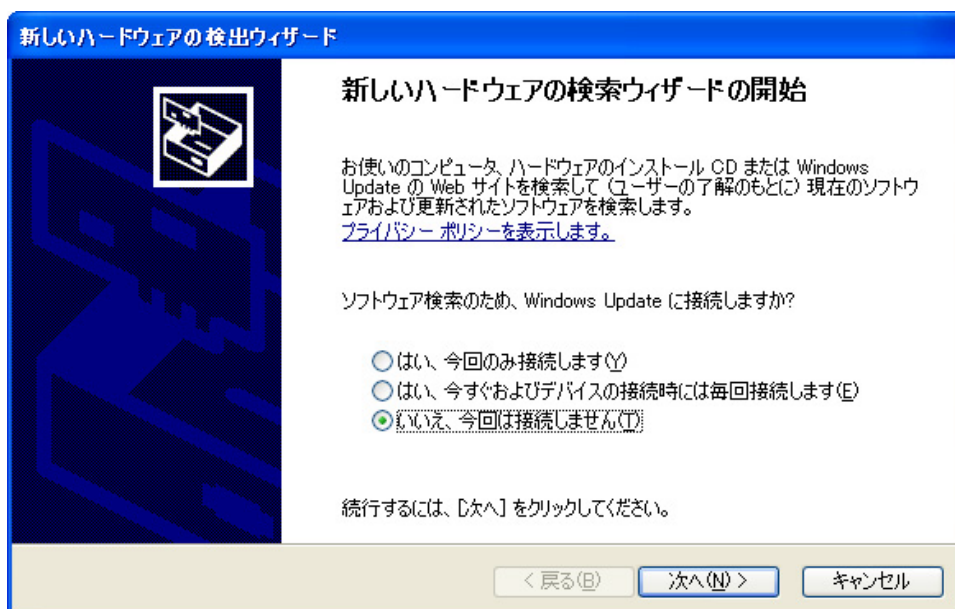



「一覧または特定の場所からインストールする」を選択して次へ進みます。

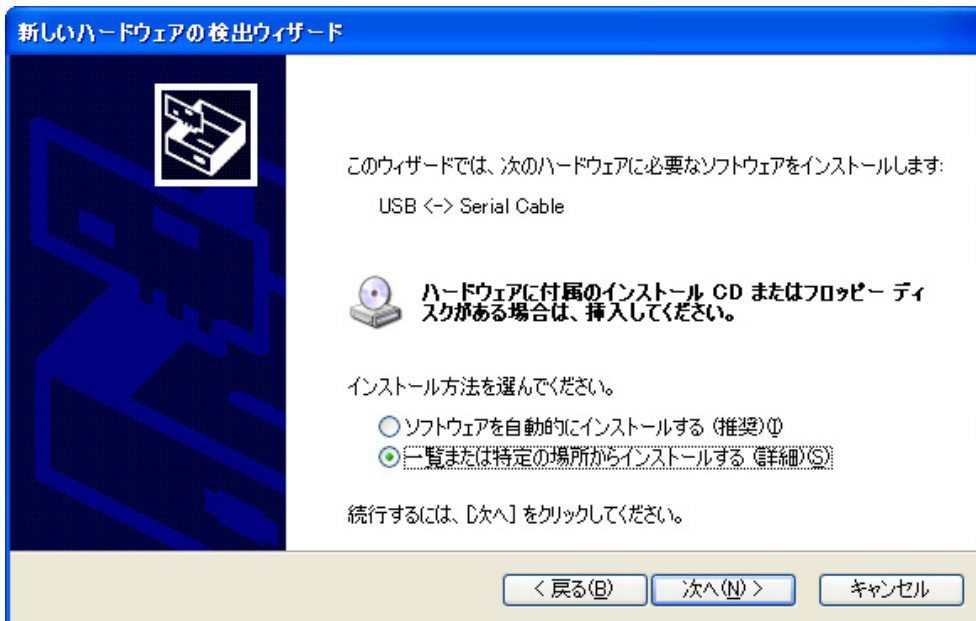


「次の場所で最適なドライバを検索する」→「次の場所を含める」をチェックして、参照をクリックします。「リムーバブル メディア(フロッピー、CD-ROM など)を検索」のチェックは外します。

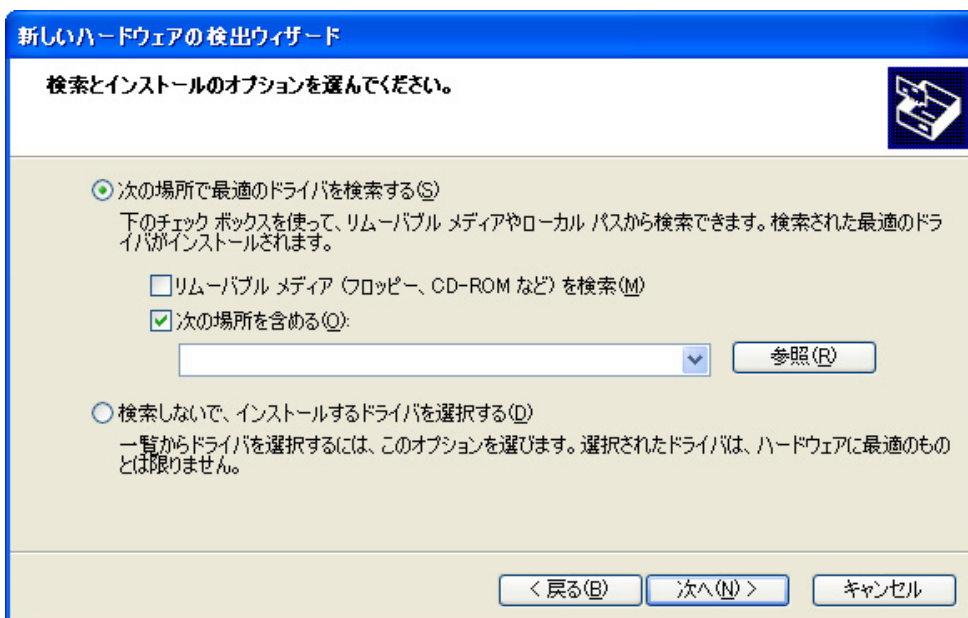


解凍したフォルダ先の「CDM 2.02.04 WHQL Certified」を指定してOKをクリックします。次へ進んで下さい。

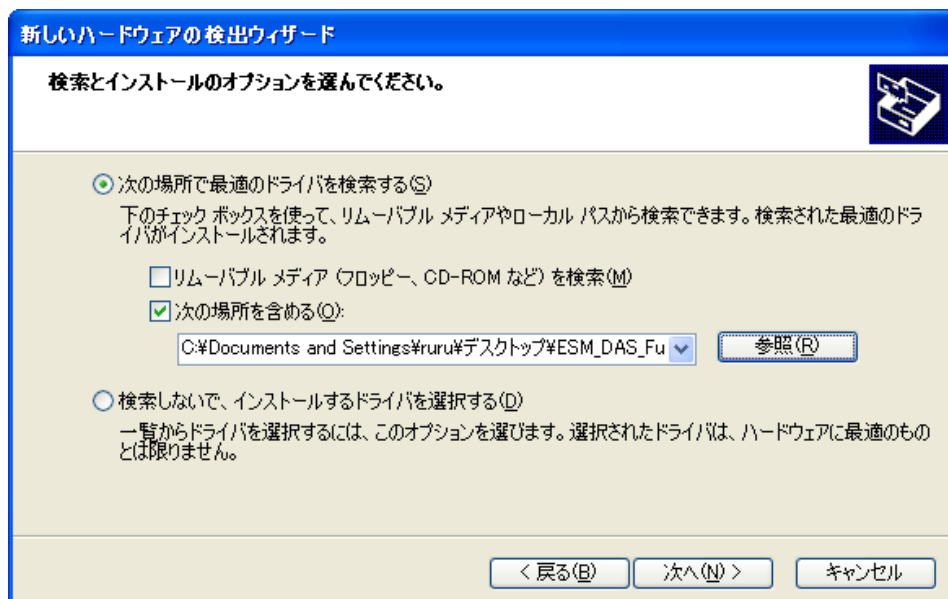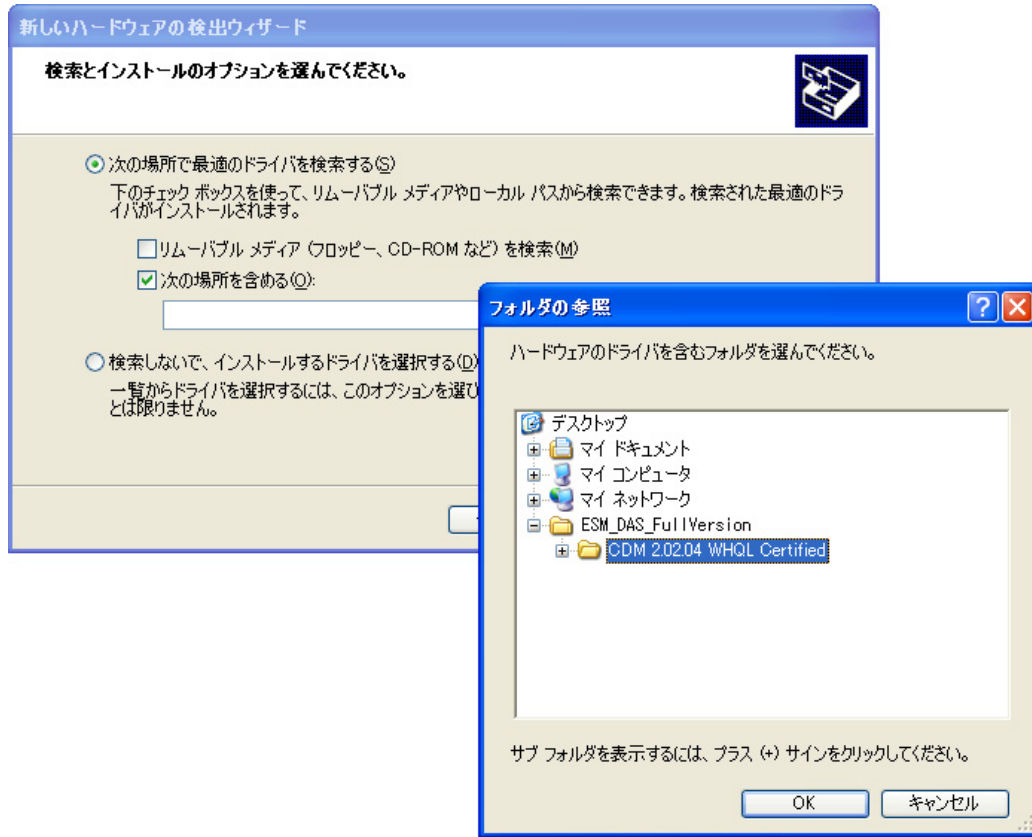


以下の画面が現れたら完了をクリックして下さい。

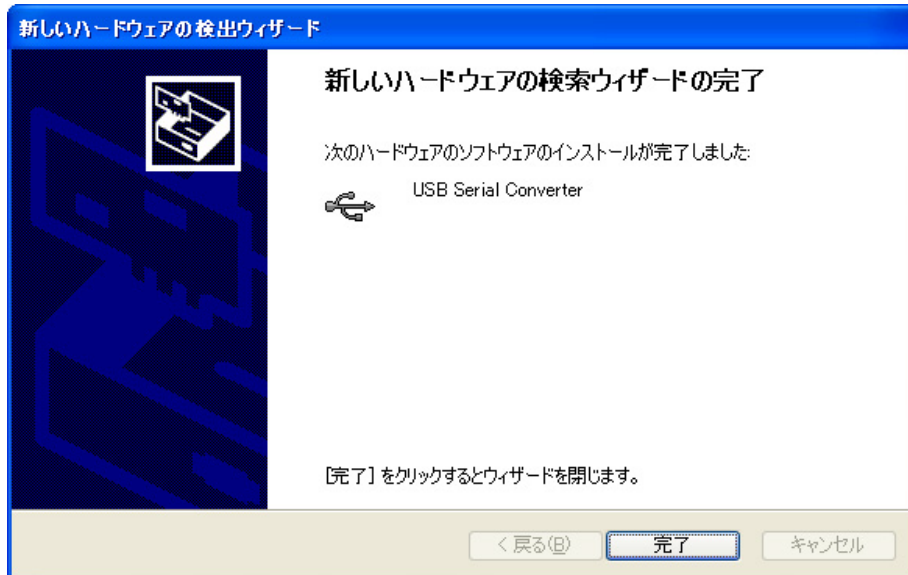


次の画面が現れ、シリアルポートの設定を行います。「いいえ、今回は接続しません」を選択して次へ進んで下さい。

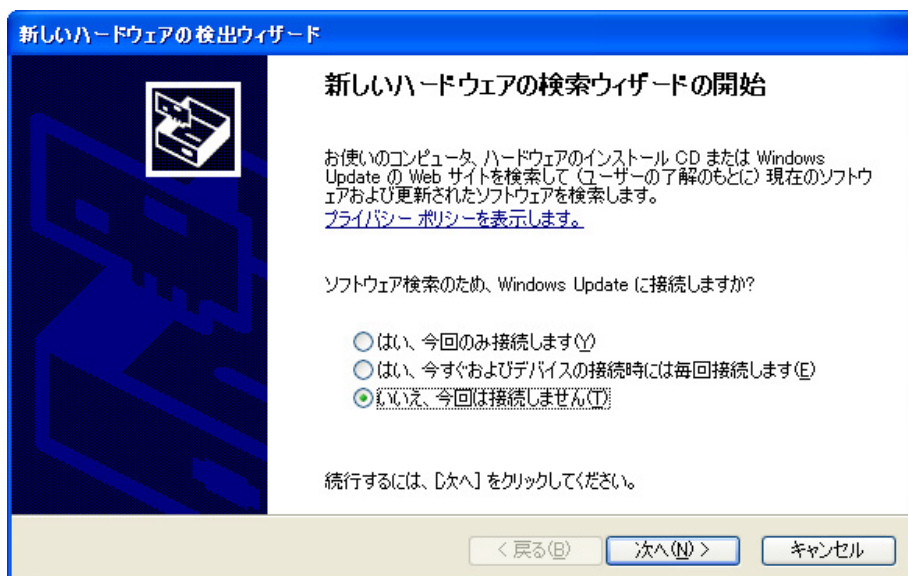

「一覧または特定の場所からインストールする」を選択して次へ進んで下さい。

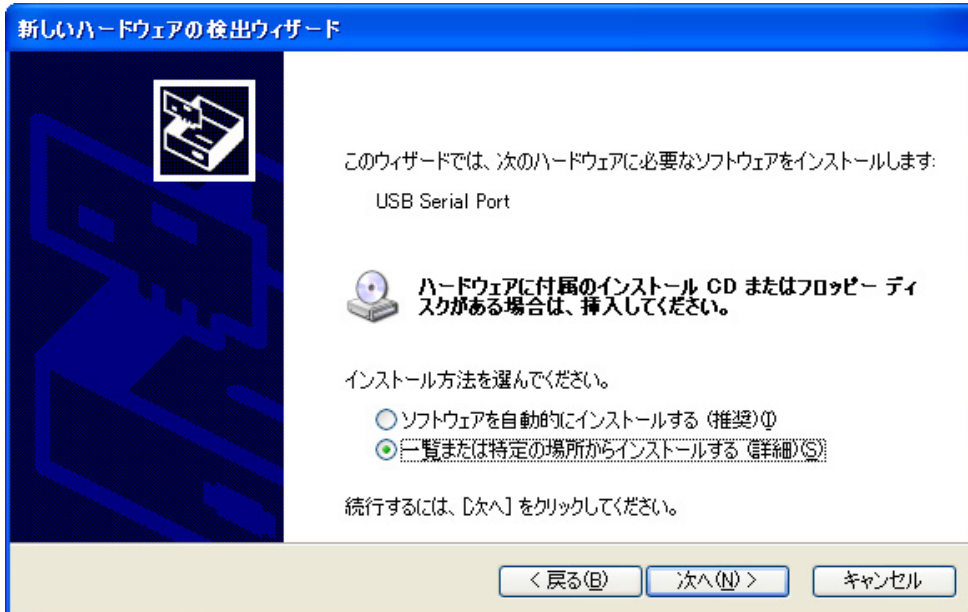


「次の場所で最適なドライバを検索する」→「次の場所を含める」を選択します。参照先は上記と同じです。

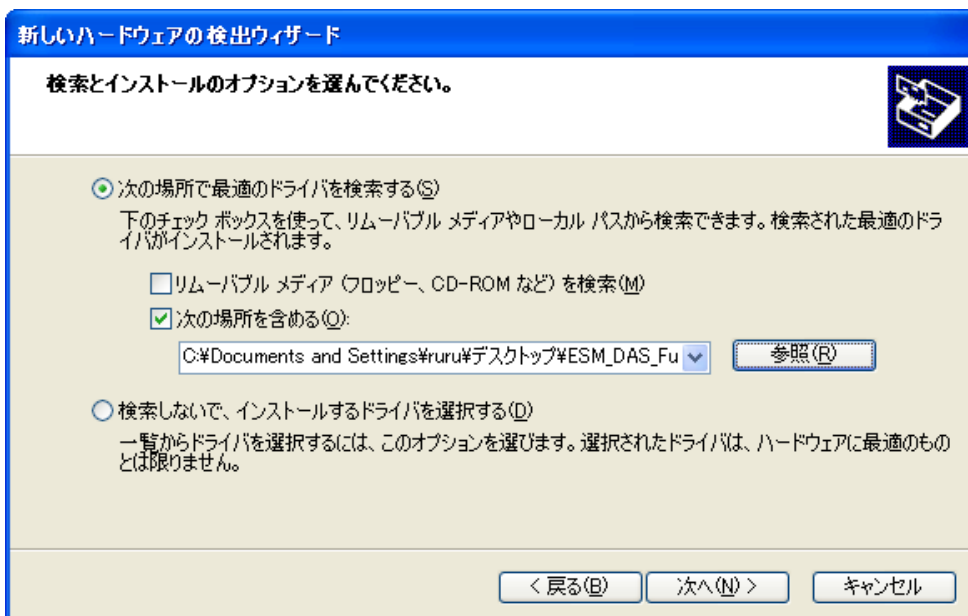

作業が終わるまでしばらく待ちます。



完了をクリックすると全ての作業が完了します。

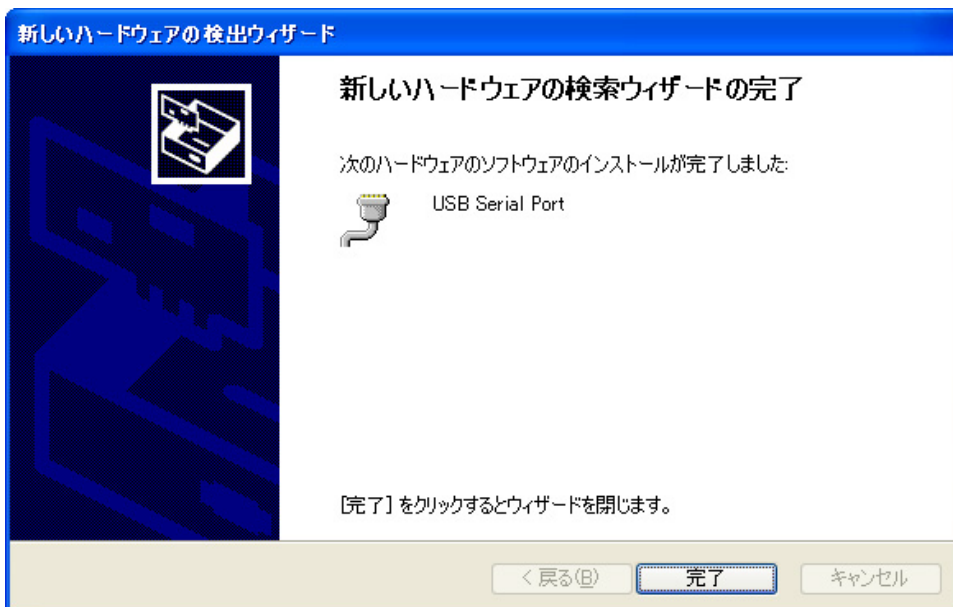

これで USB ドライバのインストールは完了しました。